


Oclean Smart Sonic elektriskās zobu birstes lietotāja rokasgrāmata

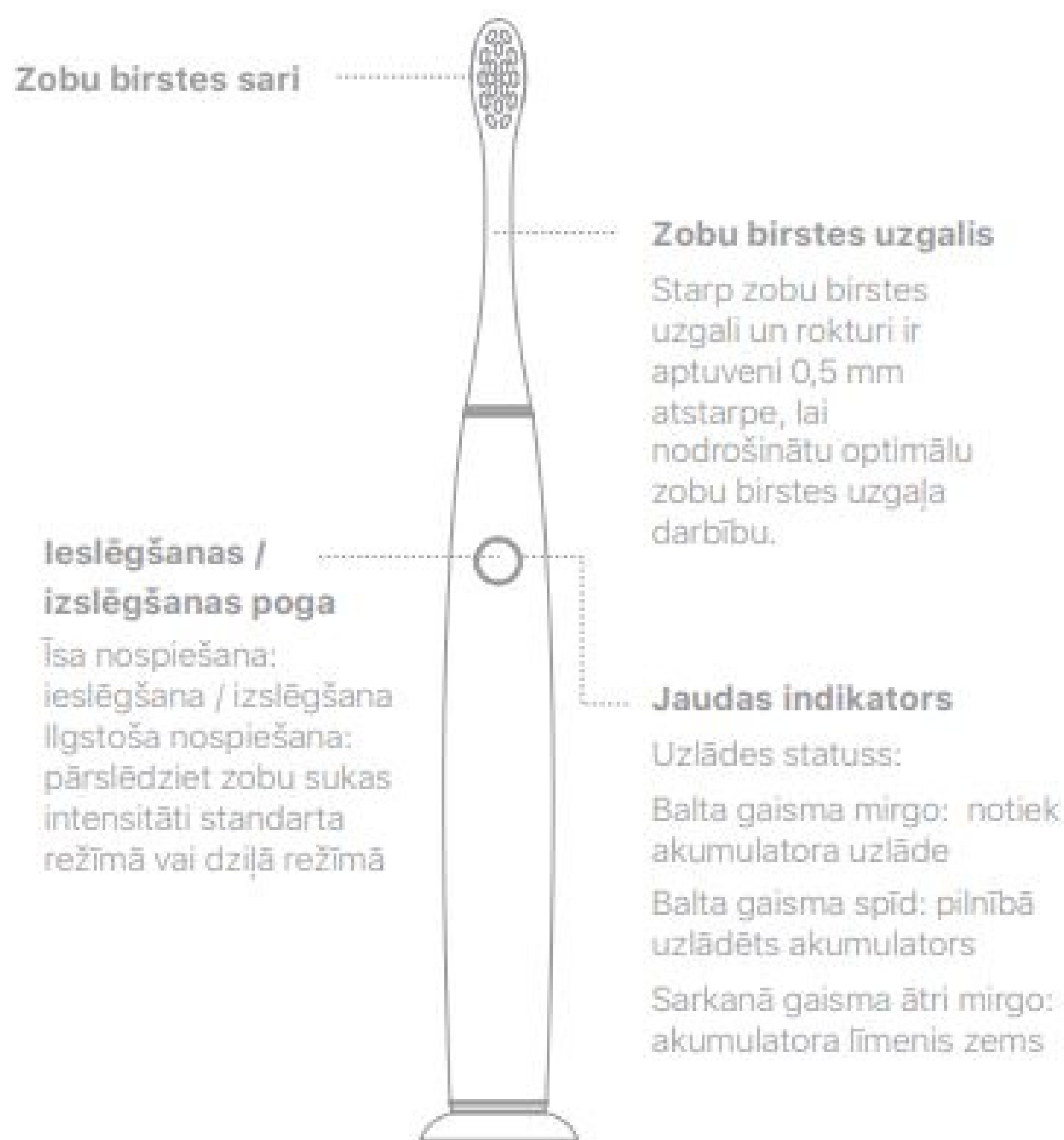

Instrukcija

- **1. Ieslēgšana**
Ieslēdziet zobu birsti, īsi nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Zobu birste automātiski izslēgsies pēc divām minūtēm beidzot tīrīšanas plānu.
- **2. Intensitātes slēdzis**
Oclean Air2 ir iepriekš iestatījis 2 veidu, 2 minūšu tīrīšanas plāni: standarta tīrīšana (noklusējums) un dziļa tīrīšana.

Lai pārslēgtu intensitāti, darba stāvoklī 2 sekundes nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.

- **3. Akumulatora indikācija**
0% -95%, strāvasindikators mirgo. 95% -100%, strāvas indikators pastāvīgi deg.

Pirmā lietošana: Uzlādes laiks ir atkarīgs no lietotāja pieprasītā akumulatora darbības laika.

Darba process: ja akumulatora jauda ir mazāka par 5%, sarkanais indikators mirgo: kā uzlādes atgādinājums.

Garantijas karte

1. Šīs klauzulas attiecas tikai uz Oclean izstrādājumiem, kas tiek pārdoti valstī vai reģionā, kurā pirkums tiek veikts, ja ir kāda neatbilstība vai izlaidums valsts politikai, noteicošā ir valsts politika.
2. Attiecībā uz veiktspējas problēmām, ko izraisa pats produkts, var izmantot pakalpojumu, kas atbilst zemāk esošajiem noteikumiem, ar derīgu pirkuma apliecinājumu:
 - 2.1. Klients var bez maksas izmantot garantijas servisu 24 mēnešu laikā no pirkuma datuma, ja paša produkta dēļ rodas darbības traucējumi.
3. Lai izmantotu nomainas un garantijas pakalpojumus, jāuzrāda derīgs pirkuma apliecinājums.
4. Garantija neattiecas uz citiem ar produktu saistītiem materiāliem (piemēram, iepakojuma kārba, Produkta rokasgrāmata utt.).

Produkta modelis:	Sērijas numurs:
Informācija par lietotāju	Nosaukums:
	Tel:
	Email:
	Adrese:
	Iegādes datums:
	Rēķina numurs:
Problēmas apraksts:	

Facebook Page



www.facebook.com/ocleanofficial

Follow the
Oclean Official Facebook Page

