

Svarīgi padomi par drošību

Ja zobu birste netiek izmantota ilgu laiku, akumulators izlādēsies, jo gai dstāves režīmā tiek patērēta enerģija. To var atrisināt uzlādējot. Tomēr, lai zobu birste darbotos, var būt nepieciešamas līdz pat 10 minūtēm ilga uzlāde. Zobu birsti drīkst lietot tikai ar Oclean īpašajiem uzgaļiem. Oclean nevarēs uzņemties nekādas sekas/pienākumus, ko izraisījusi neoficiāla sukas galviņa. Zobu birste paredzēta tikai mutes dobuma tīrīšanai. Lūdzu, neizmantojiet to citiem mērķiem. Zobu birste ir personīgs tīrīšanas līdzeklis, to nedrīkst lietot vairāk kā viens lietotājs. Lūdzu, glabājiet zobu birsti vēsā un vēdināmā vietā un izvairieties no tiešas saules gaismas iedarbības. Piesardzības pasākumi orāli jutīgām personām: šo zobu birsti nav ieteicams lietot šādiem 3 cilvēku tipiem, ja vien neesat jau konsultējies ar profesionāliem zobārstiem. Persona, kurai ir veikta vai tiek veikta periodonta operācija. Personai ar slikti pieguļošām zobu protēzēm ir nepārtraukta a siņošana no smaganām vai citi ar mutes dobumu saistīti simptomi. Persona, kuras mutes dobums ir jutīgs. Šī zobu birste nav piemērota cilvēkiem ar ierobežotām garīgajām un fiziskajām spējām, tiem, kuriem nav attiecīgas pieredzes zobu tīrīšanā, un bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, ja vien to neuzrauga.

Mijiedarbības ievads

Lietošanas pamācība: Iedarbiniet zobu birsti, īsi nospiežot strāvas padeves pogu, un zobu birste automātiski sāks atpakaļskaitīšanu. Zobu birste pēc 2 minūšu darbības apturēs vibrācijas un pēc 4 minūtēm automātiski izslēgsies. Korekcijas periods: Oclean Endurance ir funkcija, kas palīdz pirmo reizi elektriskās zobu birstes lietotājiem pielāgot tās vibrāciju tīrīšanas darbību. Pirmajās 15 darbības reizēs zobu birste pāriet "regulēšanas perioda" stāvoklī un pāriet uz "saudzīgās" intensitātes līmeni, lai palīdzētu lietotājam pirmo reizi noregulēt. Lietotāji, kuriem šķiet, ka vibrācija ir pārāk vāja, var izlaist regulēšanas posmu, 2 sekundes ilgi spiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un pārslēdzoties uz intensitātes līmeni "Strong" (Spēcīgs), un "regulēšanas periods" no šī brīža uz priekšu nedarbosies. Intensitātes slēdzis: Oclean Endurance ir 2 veidu birstēšanas plāns: Soft (Saudzīgs) un Strong (Spēcīgs) sākotnējais iestatījums, lai pārslēgtos starp intensitāti, lūdzu, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 2 sekundes, kad darbojas zobu birste, motors pēc tam vibrē, lai norādītu, ka intensitātes pārslēgšana ir veiksmīga. Uzlādes process: Kad atlikušais akumulatora uzlādes līmenis ir zem 5 %, tā motors pēc birstēšanas posma pabeigšanas signalizē ar vibrāciju. Lūdzu, noņemiet zobu birstes apakšā esošo aizsargapvalku un ievietojiet C tipa uzlādes kabeli uzlādes vietā zobu birstes apakšā, lai uzlādētu. Lai zobu birste būtu pilnībā uzlādēta, paies aptuveni 5 stundas.

| Specifikācijas | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Ierīces nosaukums | Oclean Sonic Electric Toothbrush | Modeļa nosaukums | E550I |
| Uzlāde | USB C tipa uzlādes kabelis | Lādētājs | 1,8 W |
| Uzlādes standarts | Līdzstrāva 5 V / 1 A vai augstāka | Ievade | 5V / 0,169A |
| Akumulatora ietilpība | 800 mAh (**) | Akumulatora darbības ilgums | 30 dienas (*) |
| Standarti | GB39669-2020 | Uzlādes ilgums | 5 stundas (***) |

* Apstiprināta ar 2 minūšu tīrīšanas periodu divas reizes dienā, izmantojot saudzīgu intensitāti.

** Akumulatora ietilpības pielāide teorētiski ir ± 50 mAh.

*** Ieteicams izmantot 5 V/1 A jaudas adapteri

1. NEIZJAUCIET, nesaduriet, neizspiediet vai neizmetiet ierīci ugunī.
2. Nelietojiet zobu birsti, ja tās akumulators ir izlādējies vai izpleties.
3. NENOVIETOJIET augstā temperatūrā.
4. NELIETOJIET akumulatoru, ja tas ir bijis pakļauts mitruma iedarbībai.
5. Pirms ierīces izmešanas no tās jāizņem akumulators.
6. Pirms akumulatora izņemšanas ierīcei jābūt izslēgtai.
7. Akumulatora utilizācijai jābūt drošai.

FCC BRĪDINĀJUMS


Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir atkarīga no šādiem diviem nosacījumiem: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp tie, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot aprīkojumu. PIEZĪME. Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās ēkās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un lietota saskaņā ar instrukcijām, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka konkrētā instalācijā neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, kuru var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot aprīkojumu, lietotājam ir ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
 - Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
 - Pievienojiet iekārtu citas ķēdes kontaktligzdai no tās, ar ko uztvērējs ir savienots.
 - Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi, lai saņemtu palīdzību.
- Ierīce ir novērtēta, lai atbilstu vispārējām radiofrekvenču uztveršanas prasībām. Ierīci var lietot pārnēsājamā izvietojuma stāvoklī bez ierobežojumiem.


Lietošanas norādījumi:



1. Lūdzu, ievietojiet birstītes galviņu taisni uz zobu birstes korpusa. Starp galviņu un galveno korpusu jāatstāj neliela, aptuveni 0,5 mm atstarpe, lai birstes galviņai būtu pietiekami daudz vietas pareizai darbībai.

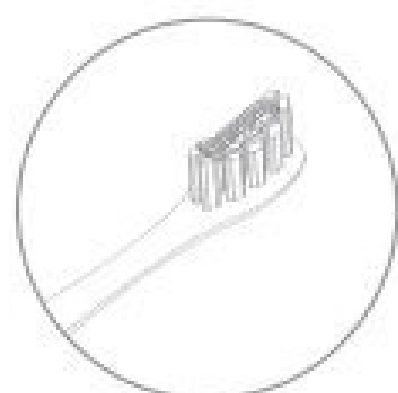


Kytke hammasharja pālle, kun se on suussasi ja siinä on pieni määrä vedellä liotettua hammastahnaa, jotta hammastahna ei roisku;

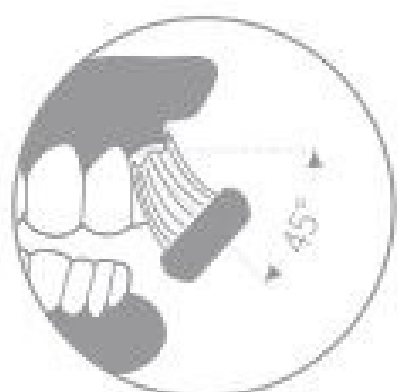

Turiet zobu birsti 45° leņķī pret smaganu līniju.



Turiet un lēnām virziet zobu birsti ar apļveida kustībām gar smaganu līniju. Uzmanieties, lai pārāk stipri nespies tu zobu birsti.

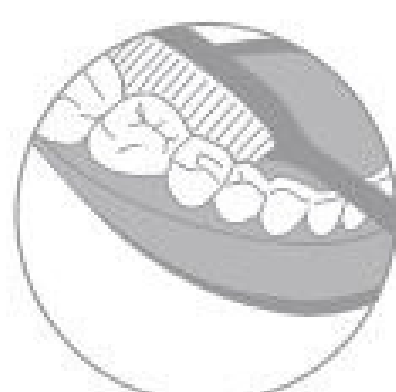

Pēc tīrīšanas izskalojiet muti ar tīru ūdeni.