

## Svarīgi drošības padomi

Zobu birsti ieteicams lietot tikai vienai personai, kas vecāka par 12 gadiem.

Pirma reizi lietojot zobi birsti, ir normāli just nelielu diskomfortu.

Zobu birsti drīkst lietot tikai ar Oclean īpašajiem uzgājiem. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību, ja tiek izmantoti jebkādi trešās puses ražoti piederumi.


Šī zobi birste ir paredzēta tikai personīgajai zobi tīrīšanai. Nav ieteicams to lietot vairākām personām.

Izvairieties no zobi birstes pakļaušanas tiešiem saules stariem. Lūdzu, izslēdziet uzlādes turētāju, ja tas netiek lietots un pirms tā tīrīšanas.

Nav ieteicams lietot tālāk norādītajos gadījumos

Personām, kam nesen bijusi ārstējošā ķirurgiskā procedūra mutēs dobumā. Klientiem, kam ir mutēs dobuma saslimšana, piemēram, nopietna smaganu asiņošana, pirms šīs zobi birstes lietošanas ieteicams konsultēties ar zobārstu.

Mentāli nestabilām personām, personām ar invaliditāti, kā arī personām, kurām trūkst atbilstošas pieredzes, ja vien ierīces lietošana netiek uzraudzīta.

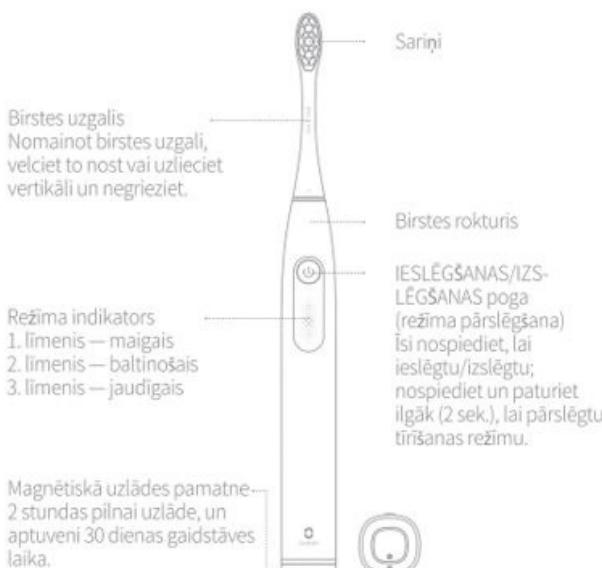

\*Dažādi gaismas līmeņi uzlādes laikā norāda dažādu akumulatora statusu.

\*Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, indikators kļūst sarkans.

\*Nemainīgs pilns gaismas līmenis norāda, ka ierīce ir pilnībā uzlādēta.



1. līmenis  
maigais tīrīšanas režīms



2. līmenis  
baltinošais tīrīšanas režīms



3. līmenis  
jaudīgais tīrīšanas režīms

## Zems akumulatora uzlādes līmenis

Indikators mirgo, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks par 20%. Jāveic uzlāde, lai nodrošinātu normālu lietošanu.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa atgādinājums: zobi birste nedarbīsies, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks par 5%. Šī nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, divreiz iemirgšodis sarkanā gaisma un motors divreiz novibrēs, atgādinot, ka akumulatora uzlādes līmenis ir joti zems. Šajā gadījumā ir nepieciešama uzlāde.

## Uzlādes līmenis

Zobi birstes uzlādes laikā uzlādes indikatorā redzams mainīgs gaismas piepildījuma līmenis. Par uzlādes līmeni var spriest pēc indikatora garuma. Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, mirgo sarkanais indikators. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, nepārtrauki deg baltais indikators.

## Uzlādes veikšana

Novietojiet zobi birsti uz lādēšanas pamatnes, intensitātes indikators sāk rādīt uzlādes progresu. Ierīci var pilnībā uzlādēt aptuveni 2 stundu laikā. (Ieteicamie lādētāja parametri ir 5 V.)


## Svarīgi uzlādes padomi

Zobi birste tiek lādēta, izmantojot ātrās uzlādes mehānismu. Ieteicams zobi birsti novietot uz lādēšanas pamatnes tikai tad, kad tas nepieciešams. Lūdzu, neatstājiet zobi birsti uz lādēšanas pamatnes ilgu laiku, jo tas var izraisīt iebūvēta akumulatora priekšlaicīgu nolietošanos, tādējādi ieteikmejot lietotāja iespējas izmanton ierīci.

1. Ierīci nedrīkst izjaukt, pakļaut triecienam, atdalīt tās dajas un mest ugnī.
2. Pārtrauciet zobi birstes lietošanu, ja akumulators ir palielinājies izmēros.
3. Nepakļaujiet akumulatoru tādas vides iedarbībai, kurā ir augsta temperatūra.
4. Nelietojiet akumulatoru, ja ierīce ir iekļuvis ūdens.

## Ieteicamā zobi tīrīšanas metode

Zobi tīrīšanas ilgums  
Saskaņā ar zobārstniecības profesionāļu ieteikumiem katram zobi tīrīšanas procesam jāliegt 2–3 minūtes.

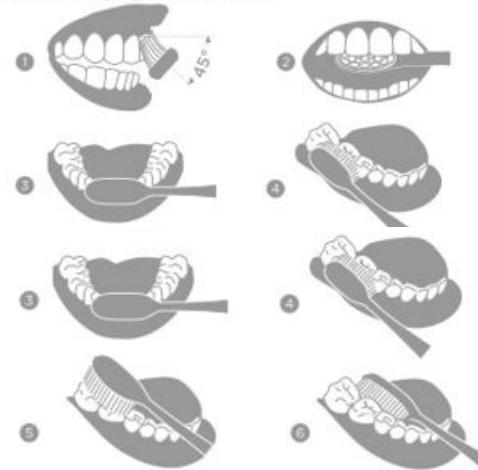

## Specifikācijas

Ierīces nosaukums	Oclean ultraskānas elektriskā zobi birste
Modelis	Oclean F1
Maksimālais spēka moments	160 gf cm
Ūdensizturīga	IPX7
Jauda	1,8 W
Lādētājs	USB lādētājs
Ievade	5 V=0,6 A
Akumulatora darbības ilgums	30 dienas
Akumulatora ietilpība	800 mAh
Uzlādes ilgums	2 stundas

\* Aprēķināts, par pamatu ļemot 2 minūtes divreiz dienā.