

Oclean Sonic elektriskās zobu birstes lietotāja rokasgrāmata

Oclean Sonic elektriskās zobu birstes garantijas sertifikāts.

Svarīgs drošības paziņojums:

- Lietojot produktu pirmo reizi, birstes lielā ātruma šūpošanās dēļ, ja tā jūtas stimulēta vai nejutīga, lūdzu, neuztraucieties, tas ir normāli, un sajūta pavājināsies un izzudīs pakāpeniski aptuveni 7-14 dienu laikā.
 - Ja tas netiek lietots ilgu laiku (produkta akumulatoram nav jaudas gaidstāves režīma enerģijas patēriņa dēļ), atkārtoti uzlādējot zobu birsti, uzlādes indikators neparādās, lūdzu, uzgaidiet 6-10 minūtes, tā var atgūt normālu uzlādi.
 - Ja uzlādes laikā zobu birstes galvenā daļa kļūst nedaudz karsta, tas ir normāli. Ja jūtat karstumu ar roku, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet uzlādi un iesniedziet zobu birsti Oclean pēc pārdošanas pakalpojumu centrā testēšanai.
 - Produktam var lietot tikai speciālu birstītes galviņu, kas paredzēta Oclean Sonic elektriskajai zobu birstei. Oclean neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās, izmantojot citus neoficiālus vai nelicencētus birstīšu uzgaļu produktus.
 - Produkts tiek izmantots tikai zobu tīrīšanai, un to nedrīkst izmantot citiem mērķiem.
 - Produkts ir paredzēts tikai personīgai tīrīšanai. Nav ieteicams to izmantot vairākām personām vienlaicīgi.
 - Produkts tiek lietots tikai iekšējās, nenovietojiet zobu birsti zem spīdošas saules uz ilgu laiku. To novietojiet sausā un labi vēdināmā vietā ar normālu temperatūru.
- Uzmanība jāpievērš pacientiem ar šādiem orālās jutības stāvokļiem:
- Tiem, kam nesēn veikta periodonta operācija vai tiek veikta ārstēšana.
 - Personām ar citiem simptomiem mutē, tostarp ar nestabilu zobu protēzi vai pastāvīgu smaganu asiņošanu.
 - Citas personas ar jutīga mutes dobuma problēmām. Šo izstrādājumu nav ieteicams lietot kopā ar iepriekš minēto grupu vai pirms lietošanas konsultēties ar profesionālu zobārstu.
 - Šis produkts nav piemērots cilvēkiem ar invaliditāti, garīgām slimībām vai bez atbilstošas pieredzes un zināšanām [ieskaitot bērnus (0-12 gadus vecus)], ja vien to neizmanto savu aizbildņu uzraudzībā.



Lietošanas instrukcija

Noklusējuma tīrīšanas plāns

Šajā produktā ir iebūvēti pieci zobu tīrīšanas režīmi: rīta režīms, nakts režīms, tīrīšanas režīms, balināšanas režīms un maigais režīms.

- Rīta režīms: salīdzinot ar "nakts režīmu", spiediens ir zems. Kā tīrīšanas un kopšanas līdzeklis tas var efektīvi noņemt zobu aplikumu, kas radies miegā laikā.
- Nakts režīms: dziļi noņem pārtikas atliekas un zobu aplikumu uz zobiem ar augstu spiedienu.
- Tīrīšanas režīms: atbilst parastās un ikdienas tīrīšanas prasībām. Salīdzinot ar "nakts režīmu", intensitātes līmenis būtu augstāks.
- Balināšanas režīms: efektīvi notīra traipus tiem, kam ir ieradums smēķēt vai dzert.
- Maigais režīms: aizsargāt smaganu veselību, pildot zobu aplikuma noņemšanas pamatfunkciju tiem, kam ir mutes dobuma alerģija.

C tipa tiešā uzlāde

Atveriet elektriskās zobu birstes apakšējo vāku, pievienojiet C tipa saskami pieslēgvietai zobu birstes apakšā, pievienojiet vienu USB saskames galu strāvas padeves avotam, pogas apļveida lampiņa mirgos baltā krāsā, un tas norāda, ka zobu birste tiek uzlādēta.

Uzlādes process

Uzlādes statuss: pogas apļveida lampiņa iedegas baltā krāsā un mirgo.

Lietojot pirmo reizi

Lietotājs var uzlādēt zobu birsti atkarībā no nepieciešamā akumulatora darbmūža, lai nodrošinātu šī izstrādājuma normālu lietošanu.

Lietošanas process

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks par 5 %, pēc īsas pogas nospiešanas, lai ieslēgtu zobu birsti, pogas apaļā lampiņa mirgo sarkanā krāsā.

Piesardzības pasākumi

Akumulatoru nevar nomainīt paši lietotāji, to var nomainīt tikai Oclean pilnvarots klientu apkalpošanas centra personāls, nespecializēts personāls nedrīkst izjaukt izstrādājumu, vai arī lietotājs automātiski atsakās no garantijas.

Lūdzu, uzlādējiet Oclean zobu birsti ar 5V/1A vai 5V/2A mobilā tālruņa lādētāju.

Šāds mobilā telefona lādētājs ietver iPhone lādētāju, planšetdatora lādētāju utt. Ja uzlādes strāva ir mazāka par 1 A, uzlādes laiks var tikt pagarināts; ja uzlādējat zobu birsti ar mobilā tālruņa lādētāju, kura spriegums pārsniedz 5 V, tas var izraisīt lādētāja ķēdes bojājumus.

Izstrādājuma specifikācijas

Ierīces nosaukums	Oclean ultraskaņas elektriskā zobu birste
Modelis	F5002
IP vērtējums	IPX7
Priekšmeta jauda	5 W
Lādētājs	C tipa tiešā uzlāde
Ievade	5V=1A
Apkopes laiks*	≥180 dienas (*)
Akumulatora ietilpība	2500 mAh (**)
Uzlādes ilgums	≤5 stundas (***)
Lietošanas standarts	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

* Apstiprināts ar tīrīšanas procesiem dienā un 2 minūtēm katram procesam.

** Akumulatora ietilpības pielāide teorētiski ir ± 50 mAh.

*** Ieteicams izmantot standarta 5V/1A adapteri.

Ieteicamā zobu tīrīšanas metode



Lēnām virziet zobu birsti 45° leņķī starp birsti un smaganu līniju. Šī procesa laikā nav nepieciešams manuāli virzīt uz augšu un uz leju.




Viegli turiet zobu birstes rokturi, lēnām pārvietojiet to apļveida kustībā un nespiediet pārāk stipri.



Pēc tīrīšanas izskalojiet muti ar tīru ūdeni.

Mazgāšana un apkope

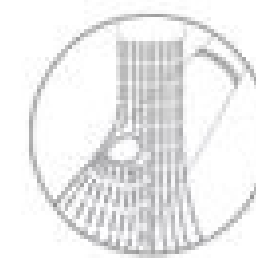

Zobu birstes korpusa un birstes galviņas tīrīšana
Pēc noskalošanas ar krāna ūdeni uzlieciet v aciņu un pagaidiet, līdz birstītes galviņa dabiski nožūst, nevelciet aiz tās sariem.



- NEIZJAUCIET, nesaduriet, neizspiediet vai neizmetiet ierīci ugunī.
- Nelietojiet zobu birsti, ja tās akumulators ir izlādējies vai izpleties.
- Nepakļaujiet akumulatoru augstas temperatūras videi.
- Nelietojiet akumulatoru, ja tas ir bijis pakļauts mitruma iedarbībai.
Pirms ierīces izmešanas no tās jāizņem akumulators. Pirms akumulatora izņemšanas ierīcei jābūt izslēgtai. Akumulatora utilizācijai jābūt drošai.

Ja tiek konstatēts, ka iegādātajam produktam ir bojājums vai defekts, lūdzu, sazinieties ar mūsu servisa līniju pa tālruni 4008-365-909.

Ražotājs: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.
Ražotāja adrese: #28G, Building 3, Dachong Business Center (west of Tonggu Road and north of Shennan Avenue), Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China
Ražošanas adrese: Building A, No. 6, Xinmu Avenue, Xinmu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen
Tīmekļa vietne: www.oclean.com



www.facebook.com/ocleanglobal