

## Oclean W1 Smart Oral Irrigator Lietotāja rokasgrāmata

**Uzgalis**  
Sprauslu var pagriezt par 360 grādiem. Nomainot sprauslu, izvelciet to vertikāli, ievietojiet sprauslu apakšā, līdz tā ir cieši piespīrināta ierīces korpusam.

**Režīma pārslēgšanas poga**  
Īsi nospiediet, lai pārslēgtos režīmā.

**Režīma indikatoris**  
1. Ieņķa manuāli pārsprāgt  
2. Ieņķa manuāli pārsprāgt  
3. Ieņķa automātiskā pārsprāgt (īslaicīgi nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, lai sāktu automātisko sērījveidu; Atbalstiet sērījas plānu pielāgošanu Oclean lietotnē)

**Ūdens tvertne**  
Ūdens tvertni var noņemt, ar nelielu spēku veikt uz leju.

**Barošanas poga / uzlādes indikators**  
Nospiediet barošanas pogu, lai modinātu ierīci gaidīšanas režīmā, režīma indikators paliek jaunā kājā iegaumētajā režīmā.  
Turot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu nepārtrauktai sērījai, atlaidiet pogu, lai apstātos.  
Mirgo sarkanā gaisma: atgādinājums par mazu jaudu; Mirgo balta gaisma: uzlādes statuss; Balta gaisma pastāvīgi deg: pilnībā uzlādēta.

**Magnētiskā uzlādes pieslēgvietā**  
Uzlāde sākas pēc tam, kad lādētājs ir magnētiski piespīrināts pie uzlādes porta.

### Product specifications

Product Name	Oclean W1 Smart Oral Irrigator
Model	Oclean W1
Water tank capacity	30 ml
Waterproof level	IPX5
Input Power	2.5 W
Charging	Oclean magnetic charging
Input	5V=0.5A
Battery life*	30 days
Battery capacity	1200 mAh
Charging time	3 hours
Standard	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

\* Remark: Battery life is calculated based on default mode, working once/day, 1 tank/time.



Follow the Oclean Official Facebook Page

Oclean Facebook Page  
[www.facebook.com/ocleanqlobal](http://www.facebook.com/ocleanqlobal)

### Instrukcijas




#### 1 Uzpildiet ūdens tvertni

Ar nelielu spēku pavelciet ūdens tvertni, lai to atvienotu. Piepildiet ūdeni vai mutes skalojamo ūdeni tvertnē (šķidruma temperatūrai nevajadzētu pārsniegt 40 °C), pēc tam ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē.



#### 2 Sprauslas uzstādīšana

1. Piestipriniet silikona vāciņu pie sprauslas.  
2. Ievietojiet sprauslu ierīces korpusā.

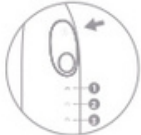

#### 3 Režīma slēdzis

Īsi nospiežot režīma slēdzi, izvēloties piemērotāko režīmu, ierīce iegaumēs jaunāko režīmu.



#### 4 Sprādziņa instrukcijas

Ievietojiet sprauslu periodiski tuvu spraugai starp zobiem. Nospiediet un turiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, lai sāktu tīrīšanu. Lēnām pārvietojiet pa smaganu līniju uz nākamo zonu, atkārtojiet visu spraugu tīrīšanu.



### Garantijas karte

- Šīs klauzules attiecas tikai uz Oclean izstrādājumiem, kas tiek pārdoti vai reģionā, kurā pirkums tiek veikts, ja ir kāda neatbilstība vai izlaides valsts politikai, noteicošā ir valsts politika.
- Attiecībā uz veikspējas problēmām, ko izraisa pats produkts, var izmantot pakalpojumu, kas atbilst zemāk esošajiem noteikumiem, ar derīgu pirkuma apliecinājumu:
  - Klients var bez maksas izmantot garantijas servisu 24 mēnešu laikā no pirkuma datuma, ja paša produkta dēļ rodas darbības traucējumi.
  - Lai izmantotu nomaņas un garantijas pakalpojumus, jāuzrāda derīgs pirkuma apliecinājums.
  - Garantija neattiecas uz citiem ar produktu saistītiem materiāliem (piemēram, iepakojuma kārbu, Produkta rokasgrāmata utt.).

Produkta modelis:	Sērijas numurs:
	Nosaukums:
Informācija par lietotāju	Tel.:
	Email:
	Adrese:
	Iegādes datums:
	Rēķina numurs:
Problemas apraksts:	