

## Oclean Smart Sonic elektriskais zobu suku Lietotāja rokasgrāmata

### Svarīgi drošības padomi

Šo produktu tiek ieteikts lietot personām vecākām par 12 gadiem.

Produktu drīkst izmantot tikai ar Oclean aizvietojamajām galviņām. Oclean neatbild par sekām, kas radušās no neapstiprinātu trešo pušu suku galviņu lietošanas.

Šis produkts ir paredzēts tikai personīgai tīrīšanai un nav ieteicams medicīniskiem nolūkiem vai daudz lietotāju izmantošanai.

Šis produkts ir paredzēts tikai iekšējai lietošanai. Neuzlieciet zobu suku tiešajā saules gaismā ilgstoši. Ieteicams to uzglabāt sausos labi ventilētos apstākļos ar normālu temperatūru.

Pirms uzlādes lūzdu, notīriet zobu suku ar mīkstu drānu un paturiet ķermeni sausu. Pēc uzlādes atkal uzstādiat apakšējo vāciņu tā vietā un pārļiecinieties, ka tas ir noslēgts un ūdensdrošs. Oclean nav atbildīgs par nekādām sekām, kas radušās sakarā ar nepareizu lietošanu.

Tas jānodrošina tikai ar drošības papildus zemu spriegumu, kas atbilst marķējumam uz produktu.

Instrukcijām par produktiem, kas satur baterijas, kuras lietotājs nevar nomainīt, jānorāda šādi: Šis produkts satur baterijas, ko var nomainīt tikai apmācīti profesionāļi.



### Lietošanas instrukcija

Uz augšu un uz leju pogu vadība

Zobu suku var iestatīt ar pogu palīdzību. Nospiediet augšup pogu, lai pārslēgtos uz režīmu, un nospiediet uz leju pogu, lai pārslēgtos uz intensitātes līmeni. Zobu suku var izvēlēties no 5 režīmiem: intensīva balināšana, specializēta tīrīšana, jutīgs režīms, polēšana un masāža. Zobu suku piedāvā 5 spēka līmeņus, no kuriem var izvēlēties.

Ieslēgšanas / izslēgšanas pogu vadība

Kad zobu suku ieslēdzas, pieskarities ON/OFF pogai, lai sāktu zobu tīrīšanu. Ja pogu pieskaramies darbības laikā, zobu suku uz 15 sekundēm pārtrauks savu darbību; pieskārienam vēlreiz zem 15 sekundēm tiks atsākta tā darbība; bez darbības vairāk nekā 15 sekundes, zobu suku izslēgs displeju un iegriezīsies miega režīmā. Ja tiek rādīts "hibernate" uz displeja, tad ar vienu pieskārienu pogai ON/OFF zobu suku iegriezīsies miega režīmā.

Zobu suku programmas

Pēc noklusējuma zobu suku strādās 2 minūtes intensīvā balināšanas režīmā, un katru 30 sekundes ar vibrāciju atgādinās lietotājam mainīt zobu tīrīšanas vietu; pēc 2 minūtēm darbība automātiski tiks apturēta.

Viedais zobu suku atsaukšanas mehānisms

Pēc zobu tīrīšanas elektriskās zobu suku ekrānā tiks parādīts vērtējums un atsaukšanas par tīrīšanas rezultātiem, balstoties uz zvaigžņu vērtēšanas sistēmu. Kad zobu tīrīšanas sadaļa tiek novērtēta ar 3 zvaigznēm, zobu suku ekrānā tiks parādīts emoji, un tīrīšana tiks beigta. Ja zobu tīrīšanas sadaļai ir novērtējums mazāks par 3 zvaigznēm (ieskaitot 2 zvaigznes, 1 zvaigzni vai neesošas), zobu suku ekrānā tiks parādīts zobu modeļis, lai atgādinātu par papildu tīrīšanas vietām, un automātiski tiks aprēķināts laiks, kas nepieciešams papildu tīrīšanai.



Zobu suku uzlāde

Šis produkts izmanto Type-C uzlādes mehānismu. Kad ir nepieciešama uzlāde, savienojiet uzlādes kabeli ar strāvas spraudni, neņemiet aizsargpārsegu apakšpusē un ievietojiet Type-C spraudni vienā no uzlādes vadiem USB portā zobu suku apakšpusē. Kad tiek pilnībā uzlādēta, lūzdu, pēc iespējas ātrāk atvienojiet uzlādes kabeli un uzstādiat aizsargpārsegu apakšpusē (kā attēlā).

Ja uzlādētais zobu suku tiek atstāta uz uzlādes vadiem ilgstoši, tas var novest pie iebūvētās baterijas priekšlaicīga izlāde un ietekmēt lietošanas pieredzi.

Ja jums ir nepieciešama detalizētāka produkta lietošanas informācija, lūzdu, sekot Oclean oficiālajam kontam.

Paldies, ka lietojat Oclean Smart Sonic elektrisko zobu suku.

### Piezīme

Jāpievērš uzmanība tiem ar šādiem mutisks jutīgumu apstākļiem:

Personām, kuras pēdējo laiku ir piedzīvojušas parodontālo operāciju vai saņem orālos ārstniecības līdzekļus.

Indivīdiem ar citiem simptomiem mutes dobumā, tostarp nestabilām protezēm vai pastāvīgu smagu smaganu asiņošanu.

Citi indivīdi ar jutīgiem un trausliem mutes dobuma jautājumiem.

Šis produkts nav ieteicams lietot šādos apstākļos, un tam jākonsultējas ar profesionālu zobārstu, pirms to lieto.

Šis produkts nav piemērots cilvēkiem ar invaliditāti, garīgo slimību vai trūkstošu atbilstīgu pieredzi un zināšanām [ieskaitot bērnus (0–12 gadu vecumā)]. Ja tas nav uzraugāms viņu aizbildņu uzraudzībā.



Zemas baterijas brīdinājums

Ja baterijas līmenis ir zem 20%, ekrānā parādīsies brīdinājums, kas norāda, ka baterija ir gandrīz izlādējusies un drīz jāuzlādē. Kad baterija ir ļoti zema un procenti ir mazāki par 1%, jūsu zobu suku izslēgsies un tā motoram vibrēs, lai jūs brīdinātu par nepieciešamību uzlādēt bateriju, un ekrāns netiks ieslēgts.

### Kā uzlādēt

Kad ir nepieciešama uzlāde, noņemiet aizsargpārsegu apakšpusē, pievienojiet uzlādes kabeli strāvas spraudnim un ievietojiet Type-C uzlādes kabeli, kas savienots ar strāvas spraudni, zobu suku uzlādes portā apakšpusē. Normālas uzlādes laikā zobu suku ekrānā tiks parādīta uzlādes saskarne. Parasti tas būs pilnībā uzlādēts aptuveni 3 stundu laikā.

### Ieteicamais zobu tīrīšanas veids



Lēnām pārvietojiet zobu suku 45 grādu leņķī starp suku šķiedrām un smaganu līniju. Nav nepieciešams manuāli tīrīt uz augšu un uz leju šajā procesā.




Maigi turiet zobu suku rokturi, lēnām pārvietojieties apļveida kustībā un, lūzdu, nepiemērojiet pārmērīgu spiedienu.



Lūzdu, skalojiet ar tīru ūdeni pēc tīrīšanas.

### Tīrīšana un uzturēšana

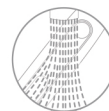

Zobu suku ķermeņa un suku galviņas tīrīšana  
Izkāpjiet zem tekoša ūdens, novietojiet vāciņu uz suku galviņas šķiedru. Pēc mazgāšanas, izžāvējiet suku galviņu un nepavelciet šķiedras.

### Produkta specifikācijas

Produkta nosaukums	Oclean X10 Smart Sonic elektriskā zobu suku
Modelis	R3100
IP vērtējums	IPX7
Ieejas jauda	2,5 W
Uzlāde	Type-C tiešā savienojumā
Ieeja	5V / 0,5 A
Baterijas darbības laiks*	60 dienas
Baterijas kapacitāte	1200 mAh
Uzlādes laiks	3 stundas

\* Aprēķināts balināšanas režīmā, 2 minūtes / reizi, 2 reizes / dienā.



1. NEATDALIET, NESITIET, NESASIET, NEMETIET ierīci ugunī.
2. NETIECIET zobu suku, ja tās baterija ir pietūkusi vai izstiepusies.
3. NESAGLABĀJIET augstā temperatūrā.
4. NELIETOJIET ierīci, ja tās baterija ir bijusi pakļauta ūdenim.
5. Pirms ierīce tiek atbrīvota, no tās jānoņem baterija.
6. Pirms noņem bateriju, jāizslēdz ierīce.
7. Bateriju jāiznīcina drošā veidā.