

Oclean Smart Sonic elektriskā zobu birste Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi padomi par drošību

Šo izstrādājumu ieteicams lietot personām, kas vecākas par 12 gadiem. Zobu birsti drīkst lietot tikai ar Oclean nomaņas uzgaļiem. Mēs nebūsim atbildīgi par jebkādam sekām, kas rodas no nesertificētu trešās puses galviņu izmantošanas. Ierīce ir paredzēta tikai personīgai tīrīšanai un nav ieteicama medicīniskiem nolūkiem vai lietošanai vairākiem lietotājiem. Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai iekštelpās. Nenovietojiet zobu birsti ilgstoši tiešos saules staros. To novietojiet sausā un labi vēdināmā vietā ar normālu temperatūru. Lūdzu, pirms uzlādes turiet korpusu sausu, nosusiniet to ar mitru drānu un regulāri notīriet uzlādes pamatni ar sausu drānu, lai novērstu traipu veidošanos.

Birstes uzgalis
Nomainot birstes uzgali, velciet to nost vai uzlieciet vertikāli un negrieziet.

Birstes uzgali zobārsti iesaka nomainīt ik pēc 2–3 mēnešiem.

Uzmanība jāpievērš pacientiem ar šādiem orālās jutības stāvokļiem:

Tiem, kam nesen veikta periodonta operācija vai tiek veikta ārstēšana.

Personām ar citiem simptomiem mutē, tostarp ar nestabilu zobu protēzi vai pastāvīgu smaganu asiņošanu.

Citas personas ar jutīga mutes dobuma problēmām.
Šo izstrādājumu nav ieteicams lietot kopā ar iepriekš minēto grupu vai pirms lietošanas konsultēties ar profesionālu zobārstu.


Šis produkts nav piemērots cilvēkiem ar invaliditāti, garīgām slimībām vai bez atbilstošas pieredzes un zināšanām [ieskaitot bērnus (0–12 gadus vecus)], ja vien to neizmanto savu aizbildņu uzraudzībā.



Lejupielādējiet lietotni, skenējot QR kodu

Skārienekrāns
Piespiediet augšup/lejup un noklikšķiniet uz darbībām. Lai veiktu pārvilkšanu, lūdzu, pieskarieties ekrāna malai ar pirkstu.

Speciāls turētājs “divi vienā”
Turētājs apvieno sienas stiprinājumu un uzlādes pamatni vienā.

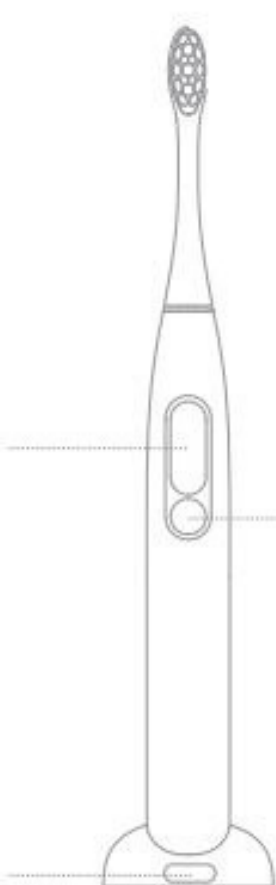


Lai sasniegtu vislabāko tīrīšanas efektu, ir kalibrēts zobu birstes motora šūpošanās diapazons. Lūdzu, nelietojiet to bez suku uzgaļa uzstādīšanas, lai izvairītos no nevajadzīga trokšņa, ko rada motora tukšgaita un ietekmētu motora kalpošanas laiku.


IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga
Tiklīdz zobu birste ieslēdzas, īsi nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kad zobu birste darbojas, darbība tiek apturēta. 30 sekunžu laikā vēlreiz īsi nospiežot pogu, lai atsāktu darbību; nekāda darbība ilgāk par 30 sekundēm neaizsegs displeju un neiesaldēs zobu birsti. Turot nospiestu galveno interfeisu 8 sekundes, var atjaunot zobu birstes rūpnīcas iestatījumus.

Birstēšanas režīma iestatīšana
Lietotāji var izvēlēties birstēšanas režīmu, pavelkot displeju uz augšu un uz leju vai uz galvenā interfeisa malas. Pēc zobu birstes datu sinhronizēšanas ar tālruni lietotājiem ir iespēja aktīvi pakļaut zobu birsti adaptīvās tīrīšanas plānam.

Sunrise Soothing: 2 minūšu un 30 sekunžu ilgums, ar maigu tīrīšanas iestatījumu, optimizēts ērtai tīrīšanas pieredzei.
Sunset Clearout: 3 minūšu režīms ar augstu tīrīšanas efektivitāti, optimizēts efektīvai zobu plāksnes noņemšanai, piemērots dziļai tīrīšanai naktī.
Exclusive Mode: noklusējuma (bez personalizācijas) režīmā ikona parādīsies dzeltena, un režīms būs standarta tīrīšanas režīmā bez laika ierobežojuma. Kad personalizācijas iestatījums ir aktīvs, izmantojot lietotni, režīma ikona kļūst sarkanā krāsā un kļūst par personalizētu režīmu.

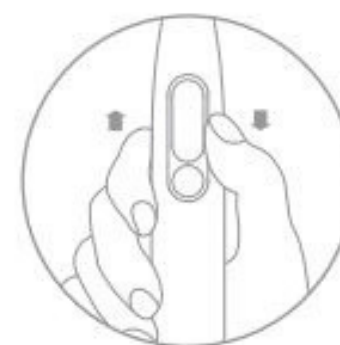

Pavelciet ekrānu uz augšu un uz leju

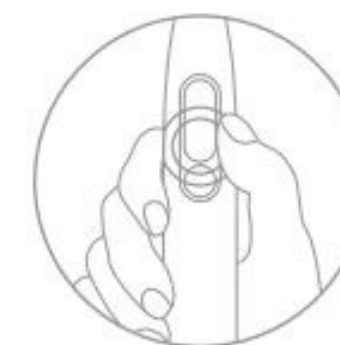

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai apstiprinātu iestatījumus

Uzlādes vadlīnijas

Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zem 5%, zobu birstes displejā laiku pa laikam tiek parādīts brīdinājums, norādot, ka akumulatora uzlādes līmenis ir zems, un tas drīz jāuzlādē. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir ļoti zems un procentuālā vērtība ir mazāka par 1%, zobu birste ir izslēgta un zobu birstes motors vibrē, lai brīdinātu par akumulatora uzlādi, un ekrāns arī netiek ieslēgts.

Izņemiet uzlādes pamatni no sienas uzstādīta turētāja “divi vienā” un pievienojiet to uzlādes kabelim. Uzlādējiet lādētāju ar zobu birstes pamatni, lai nodrošinātu, ka zobu birste ir novietota vertikāli un fiksēta lādēšanas pamatnē. Normālas uzlādes laikā zobu birstē būs redzama uzlādes zīme un akumulatora uzlādes procents, un tā būs pilnībā uzlādēta aptuveni 2 stundas.

Svarīgs brīdinājums par uzlādi

Tā kā elektriskā zobu birste ir aprīkota ar ātrās uzlādes mehānismu, ieteicams pievienot un uzlādēt zobu birsti, kad nepieciešams. Nelieciet zobu birsti uz lādētāja, ja uzlāde nav nepieciešama vai tā ir pilnībā uzlādēta, jo, atstājot pilnībā uzlādētu zobu birsti uzlādētu uz ilgu laiku, var priekšlaicīgi izlādēties iebūvētais akumulators, tādējādi ietekmējot lietošanu.

Ieteicamā zobu tīrīšanas metode



Lēnām virziet zobu birsti 45° leņķī starp birsti un smaganu līniju. Šī procesa laikā nav nepieciešams manuāli virzīt uz augšu un uz leju.



Viegli turiet zobu birstes rokturi, lēnām pārvietojiet to apļveida kustībā un nespiediet pārāk stipri.



Pēc tīrīšanas izskalojiet muti ar tīru ūdeni.

Norādījumi

Pirmā ieslēgšana
Lietojot pirmo reizi Pieskarities ieslēgšanas/izslēgšanas pogai, lai ieslēgtu zobu birsti un pieslēgtu Bluetooth. Pēc tam zobu birste paliks gaidstāves režīmā; Bluetooth vienmēr būs ieslēgtā režīmā.

Lūdzu, meklējiet un savienojiet savu mobilo tālruni un zobu birsti 10 metru attālumā bez šķēršļiem. Ja ir šķēršļi, tiks ietekmēts Bluetooth savienojuma attālums. Ja tas pārsniedz šo attālumu, Bluetooth savienojums būs nestabils/pārtraukts.

Lietotnes instalēšana: Pēc QR koda skenēšanas, lai lejupielādētu lietotni Oclean Care +, lūdzu, meklējiet un pievienojiet savu zobu birsti lietotnē. Piezīme. Mēģinājums pievienot zobu birsti tālrunī sadaļā “Sistēmas iestatījumi - Bluetooth iestatījumi” nedarbosies.

Funkcijas iestatījumi: skenējiet QR kodu, lai pabeigtu lietotnes instalēšanu, kas ļaus iestatīt dažādas zobu birstes funkcijas, piemēram, ieslēgt/izslēgt “Change Brushing Area Alert” (Brīdinājums par tīrīšanas zonas maiņu) funkciju utt. Turklāt jūs varat arī pielāgot savu tīrīšanas plānu un pārsūtīt pielāgoto plānu tieši uz jūsu zobu suku.

Ierakstu tīrīšana lietojumprogrammā

Lai saņemtu tīrīšanas datus no birstēm, zobu birste ir jāsavieno pāri ar lietotni un jāpievieno tai. Tā kā zobu birstei ir ierobežots atmiņas lielums datu glabāšanai un tā glabā tīrīšanas datus ne ilgāk kā 7 dienas, lūdzu, sinhronizējiet tīrīšanas datus ar lietotni 7 dienu laikā.

Tīrīšanas plāns: bez jebkādiem iestatījumiem zobu birste pēc noklusējuma darbosies režīmā “Exclusive Mode” (Ekskluzīvs režīms), kur tiks parādīts ievērojams brīdinājums, kad zobu birste darbosies 2 minūtes un 3 minūtes, un pēc 4 darbības minūtēm tā automātiski pārstās darboties.

Zobu birstes uzlāde: pirms uzlādes nosusiniet zobu birstes apakšu un pēc tam ievietojiet USB uzlādes kabeli uzlādes pieslēgvietā uz pamatnes. Pēc tam varat noteikt akumulatora uzlādes līmeni, izmantojot Oclean elektriskās zobu birstes displejā redzamo akumulatora procentuālo vērtību. Pēc pilnīgas uzlādes, lūdzu, laikus izņemiet zobu birsti no uzlādes pamatnes. Pēc tīrīšanas uzlādējiet to, kad zobu birste brīdina par zemu akumulatora uzlādes līmeni.

Zobu tīrīšanas pārskats

Kad tīrīšana ir pabeigta, produkta displejā tiek parādīts tīrīšanas laiks, tīrīšanas rezultāti, padomi papildu tīrīšanai, saskarnes veicināšana un integrētais datu pārskats par tikko pabeigto tīrīšanu.

• Specifikācijas

Ierīces nosaukums	Oclean Smart Sonic elektriskā zobu birste
Modelis	Y2076
IP vērtējums	IPX7
Jauda	5W
Lādētājs	Oclean USB turētājs (uzkarināms un uzlādējams “divi vienā”)
Ievade	5V=1A
Akumulatora darbības ilgums*	25 dienas
Akumulatora ietilpība	800 mAh
Uzlādes ilgums	Aptuveni 2 stundas
Standarta	GB 39669-2020
Bluetooth	Bluetooth 4.2 un jaunāki

* Izmantojot noklusējuma režīmu, tas tiek aprēķināts 2 minūšu laikā, 2 reizes dienā darba apstākļos.



- NEIZJAUCIET, nesaduriet, neizspiediet vai neizmetiet ierīci ugunī.
- Nelietojiet zobu birsti, ja tās akumulators ir izlādējies vai izpleties.
- NENOVIETOJIET augstā temperatūrā.
- NELIETOJIET akumulatoru, ja tas ir bijis pakļauts mitruma iedarbībai.